


DuoSafe

DILATADOR DE PERTUITO

Descrição geral do produto

O DuoSafe é um dilatador de pertuito desenvolvido para uso em procedimentos médicos e estéticos que utilizam cânulas para a introdução de fios de PDO, substâncias ou outros dispositivos compatíveis. Fabricado em aço inoxidável cirúrgico, promove a dilatação controlada do ponto de entrada, facilitando a passagem da cânula e contribuindo para maior praticidade durante o procedimento.

O produto é reutilizável, resistente à corrosão e de alta durabilidade, mantendo seu desempenho quando submetido aos processos adequados de limpeza, desinfecção, esterilização e armazenamento.

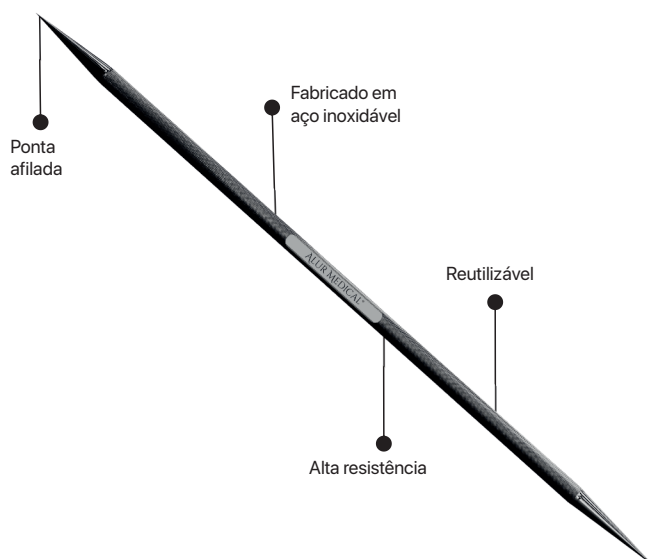

Advertências e Precauções

- Uso exclusivo por profissionais habilitados.
- Produto estéril, esterilizado por óxido de etileno (EO).
- Utilizar somente após limpeza e esterilização adequadas.
- Inspecionar o produto antes de cada uso.
- Não utilizar em caso de danos, deformações, corrosão, desgaste ou suspeita de contaminação.
- Utilizar exclusivamente para a finalidade prevista.
- Manter técnica asséptica durante todo o procedimento.
- Não aplicar força excessiva durante o uso.
- Realizar limpeza, desinfecção e esterilização antes de cada reutilização.
- Armazenar em local limpo, seco e protegido.
- Evitar contato com agentes corrosivos incompatíveis com o aço inoxidável.
- Descontinuar o uso caso sejam observadas alterações que comprometam a segurança ou o desempenho do produto.

IFU


Instruções de Uso

Instructions for Use



Instruções de uso

1. Verifique se o DuoSafe está limpo, esterilizado e em perfeitas condições de uso.
2. Realize a assepsia da área e o pertuito conforme a técnica adotada.
3. Introduza cuidadosamente o dispositivo no pertuito.
4. Realize a dilatação por meio de movimentos suaves e controlados, sem aplicar força excessiva.
5. Remova o dispositivo após obter a dilatação desejada.
6. prossiga com a introdução da cânula ou outro dispositivo compatível.
7. Após o uso, realize a limpeza, desinfecção, esterilização e armazenamento adequados.

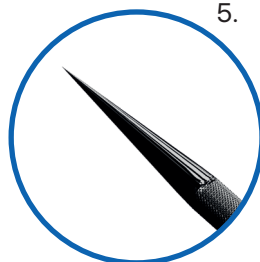

Observação: Uso exclusivo por profissionais habilitados e treinados, seguindo as normas de biossegurança e os protocolos clínicos aplicáveis.

Prazo de Validade

Tempo indeterminado.